

# ハクゾウアイスティック

## 再使用禁止


### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

\* 柄の片側にセルローススポンジを取り付けている。

本品は酸化エチレンガス(E0G)による滅菌を行っている。

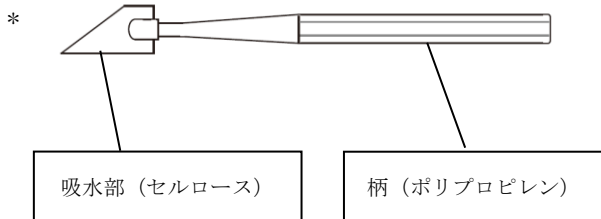

\* 全長: 85mm±8.5mm

### 【使用目的又は効果】

眼科等の処置時に体液・排出液及び薬液等を吸収・除去するために用いる。視認性の確保・向上に繋がる。

### 【使用方法等】

柄の部分を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所に合わせて吸収する。

### 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 吸水部や柄を切断する等の行為は絶対にしないこと。
- 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 包装開封後、すぐに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### 2. 有効期間

- \* 本品の容器若しくは被包に記載
- \* [自己認証(自社データ)による(使用期限参照)]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

\* <http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)